


MECRON Standard Tape

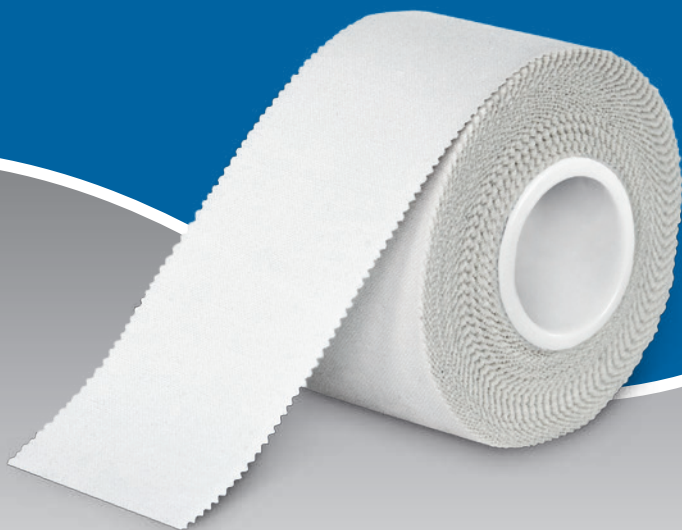

MECRON

USA / GB Instructions for use

MECRON Standard Tape

Non-elastic Athletic Tape

- > A clear overview of indication and disposition is required.
- > Find out whether the patient shows allergic reaction to taping material.
- > Remove body hair around application area (optional). Please use a long-hair trimmer (no wet shaving!).
- > Apply the tape on clean and dry skin.
- > Ensure a correct body posture of the patient when applying the tape.
- > Make sure that the tape does not arch and that the tape is not creased.
- > Many tapes are stretched during application but ensure that measured force is used. The tissue (circulation) must not be constricted.
- > Keep moulding the tape so that it fits correctly.
- > When removing the tape, fix the surrounding tissue with your hand. This reduces your patient's pain and protects the skin from excessive irritation.
- > The MECRON Standard Tape is a single-use product.

Indications

- > for treatment of muscular pain
- > for stabilization of joints and muscles

Contraindications:

- > large and serious skin injuries
- > open wounds with risk of infection
- > nondistinctive diagnoses
- > allergic reactions to tape material

Technical data

Size: 3.8 cm × 10 m

Colour: White

Material: Cotton, Zinc oxide adhesive and Latex

Maintenance: The product does not require maintenance.

Caution

Always follow these instructions for use. Contact your doctor if you sense any unusual reaction (such as skin swelling, skin redness etc.). In case of improper handling function and maximum safety of the product can no longer be guaranteed.

D Gebrauchshinweis

MECRON Standard Tape

Unelastisches Stabilisierungstape

- > Machen Sie sich anfänglich ein klares Bild über die Indikation und Anlage.
- > Testen Sie den Patienten auf die Verträglichkeit von Tapes.
- > Entfernen Sie eventuelle Körperhaare an der Anlagestelle (optional). Bitte verwenden Sie dazu einen Langhaarschneider (keine Nassrasur!).
- > Tragen Sie das Tape auf die gereinigte, trockene Haut auf.
- > Achten Sie während des Tapens immer auf die richtige Körperhaltung des Patienten.
- > Achten Sie darauf, dass sich das Tape nicht wölbt und keine Falten wirft.
- > Viele Anlagen werden mit Zug angelegt, achten Sie jedoch darauf, die Kraft zu dosieren. Das Gewebe (Durchblutung) darf nicht eingeschnürt werden.
- > Modellieren Sie Ihre Anlage zwischen den Zügeln immer wieder an, um die richtige Passform zu erhalten.
- > Achten Sie beim Entfernen der Tapes darauf, dass Sie das umliegende Gewebe mit der Hand fixieren. Dies vermindert den Schmerz für Ihren Patienten und schützt die Haut vor zu starker Reizung.
- > Das MECRON Standard Tape ist ein Einmalprodukt.

Indikationen

- > gegen Muskelbeschwerden
- > zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln

Kontraindikationen:

- > großflächige Hautverletzungen
- > offene Wunden mit Infektionsgefahr
- > unklare Diagnosen
- > allergische Hautreaktionen auf Tapematerial

Technische Daten

Größe: 3,8 cm × 10 m

Farben: Weiß

Material: Baumwolle, Zinkoxid-Kleber und Latex

Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

Vorsicht

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Rötung usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produktes sind die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de

