

# OrthoWedge **Light**

## Vorfußentlastungsschuh

Vorfußentlastung nach Hallux Valgus- und Hammerzehen-OPs  
und zur Abheilung von Vorfußulzerationen



### FÜR SCHNELLE HEILUNG UND REGENERATION

- > geringes Eigengewicht
- > Compression EVA-Außensohle: Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft
- > Innensohle angepasst an die gängigen OrthoWedge-Größenmodelle
- > einfacher Austausch der Sohlensysteme

HiMi-Nr. 31.03.03.5041

### KOMPATIBEL MIT:



PegAssist® Insole  
Waben-Einlegesohle



TwinShoe®  
Ausgleichsschuh



# DARCO

# Der OrthoWedge Light ist die optimierte Version des OrthoWedge.



breiter Klettgurt mit medialer und lateraler Umlenkung



austauschbare Innensohle



atmungsaktives Mesh-Material



EVA-Außensohle leicht zu bearbeiten (schleif- und fräsbar)

## EIGENSCHAFTEN

- > Plus an Komfort: Atmungsaktives Obermaterial und herausnehmbare Innensohle
- > Leichte Compression EVA-Außensohle kombiniert Stoßdämpfung und Standsicherheit
- > Konstruktion des Entlastungskeils (15°) generiert Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß
- > Weite Öffnungsmöglichkeit und variable Verschlüsse sichern bequemen Einstieg
- > Breiter Klettgurt mit medialer und lateraler Umlenkung für zusätzlichen Rückfußhalt
- > Einfache Umrüstung auf rechts oder links

## INDIKATIONEN

- > postoperativ nach Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs
- > Abheilung von Vorfußulzerationen



## WIRKUNGSWEISEN

- > Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß dadurch spezielle Entlastung und Schutz des Vorfußes
- > Compression EVA-Außensohle: Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft

## KOMPATIBEL MIT

GRÖSSE ART.-NR. PZN

### PegAssist® Insole

Waben-Einlegesohle

XS	PAS0	14255270
S	PAS1	14255287
M	PAS2	14255293
L	PAS3	14255301
XL	PAS4	14255318




### TwinShoe®

Ausgleichsschuh



## GRÖSSEN UND MASSE

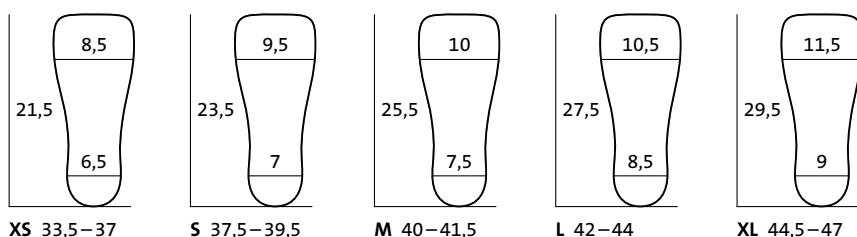

GRÖSSE ART.-NR. PZN

### OrthoWedge Light

Farbe: Schwarz

XS	OW0B-STL	16630275
S	OW1B-STL	16630281
M	OW2B-STL	16630298
L	OW3B-STL	16630306
XL	OW4B-STL	16630312