

Body Armor® Night Splint – la férula dorsal nocturna de DARCO



La férula Body Armor® Night Splint se compone de una estructura de plástico rígida y una trabilla para el dedo gordo para alargar la fascia. Esta combinación permite actuar contra las indicaciones siguientes:

- > acortamiento de la fascia plantar
- > espolón calcáneo
- > inflamación y debilidad del tendón de Aquiles
- > metatarsalgia
- > equinismo y contracturas de la articulación del pie

La pieza para los dedos realiza una flexión dorsal en el primer dedo y consigue así un mayor alargamiento de la fascia plantar. (disponible opcionalmente)



DARCO

Body Armor® Night Splint es una férula nocturna que mantiene el pie en un ángulo de 90 grados respecto a la pierna. Esta posición evita que el pie quede en posición de equinismo y, así, evita también el acortamiento del tendón de Aquiles.



La trabilla para el dedo gordo levanta el hallux, lo que permite aprovechar el mecanismo Windlass*. De esta forma se consigue también un alargamiento de la fascia plantar.

Además permite un ligero alargamiento de

- > el tendón de Aquiles
- > el tendón tibial posterior
- > los flexores profundos
- > la musculatura de la pierna

La férula nocturna Body Armor® Night Splint es la única ortesis del mercado que permite la flexión natural del pie. De este modo se consigue el estiramiento preciso y duradero de la fascia plantar.

* Mecanismo Windlass: Una flexión dorsal del primer metatarsiano hace que la inserción de la fascia gire sobre la cabeza del mismo. Este movimiento estira la fascia plantar y acorta la distancia entre el calcáneo y las cabezas metatarsales elevando el arco plantar longitudinal.

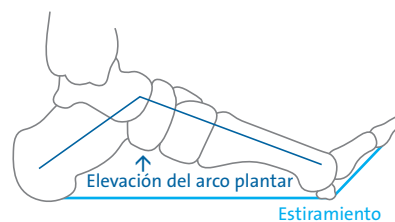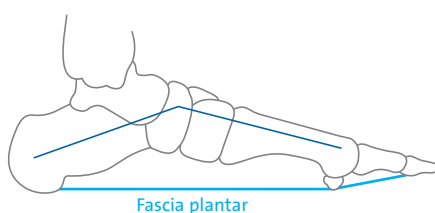

Las cintas con velcro ajustables aseguran la colocación rápida y sencilla de la férula, garantizando un ajuste cómodo.



La anilla de goma permite al usuario fijar la trabilla del dedo gordo en diferentes posiciones.



El perfil bajo de la férula reduce en hasta un 70% las fuerzas de tensión sobre el dorso del pie y el borde de la tibia.

La férula Body Armor® Night Splint se puede usar en el pie derecho y en el izquierdo y está disponible en dos tallas.

TALLA	Nº DE ARTÍCULO
-------	----------------

Body Armor® Night Splint

Color: blanco-azul

Small	34,0 – 36,0	BADS-S
Standard	37,0 – 47,0	BADS

Toe Plate | Pieza para los dedos

Universal	BADS-P
-----------	--------

