

Descarga de la presión con las plantillas de DARCO

5 plantillas especiales – múltiples utilidades

Todos los sistemas de plantillas DARCO de un vistazo



Relief Contour Insole

PegAssist® Insole

PegContour® Insole

PegContour® Insole Uni

¡Nuevo!


Puzzle Insole®



DARCO

Relief Contour Insole

Plantilla con almohadillado blando

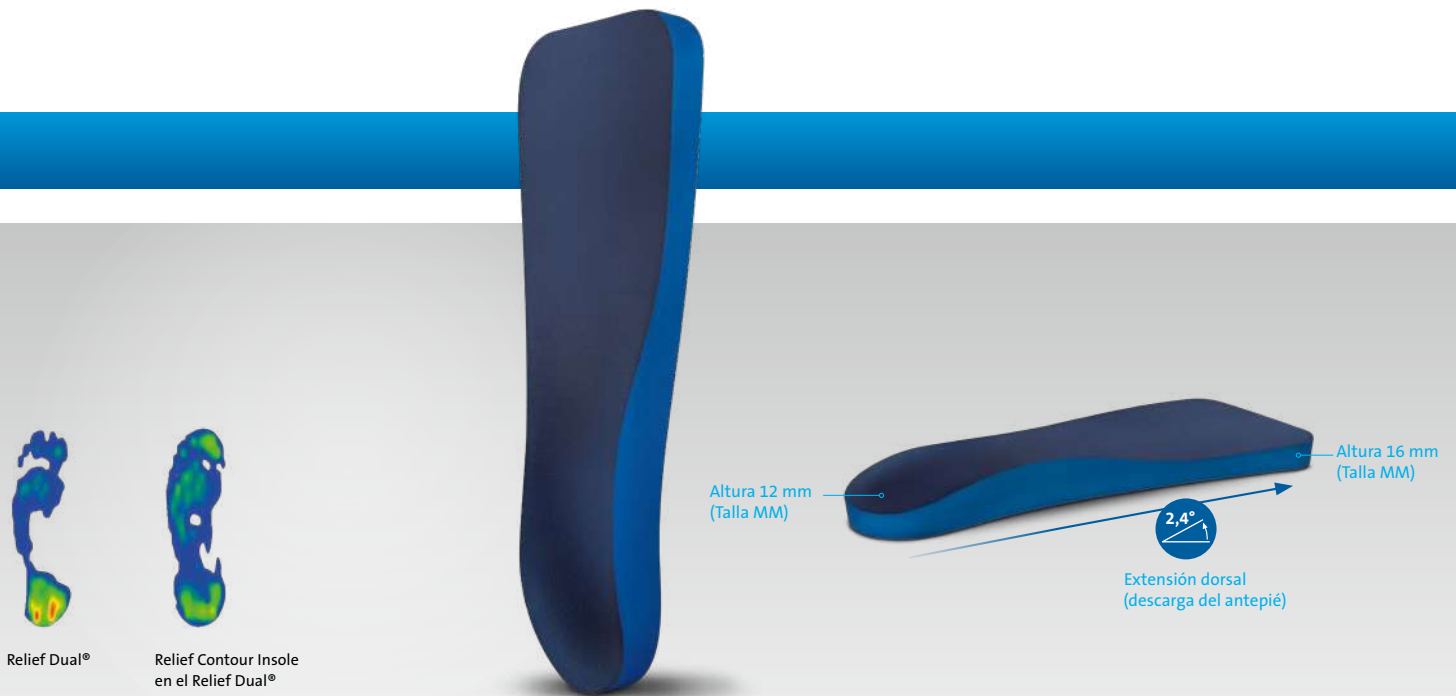

Distribución de la presión de hasta el 90 % gracias al contacto con prácticamente toda la suela

La Relief Contour Insole es una plantilla continua con almohadillado blando. Gracias a los contornos anatómicamente adaptados se consigue una distribución de la presión de casi el 90%. El arco longitudinal lateral y medial y el arco transversal proximal garantizan la distribución ideal de la carga. Se evitan picos altos de presión. El material PU posee una alta capacidad de recuperación. Gracias a la inclinación de la cuña de 2,4 grados, se consigue una descarga adicional del antepié. Un agradable revestimiento de tejido de punto y licra aumenta la comodidad de uso.

INDICACIONES

- > Después de cirugía del hallux valgus o del dedo meñique (técnica de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- > Pie valgo, pie plano, pie plano transverso
- > Alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en combinación con deformidades leves de los pies

PROPIEDADES

- > Plantilla con almohadillado blando (continua)
- > El revestimiento de la plantilla elástica bidireccional, de tejido de punto y licra es suave y cómodo
- > Material PU tallable
- > Tacón negativo de 2,4° extensión dorsal
- > Disponible para el pie derecho e izquierdo



PegAssist® Insole

Plantilla de descargas selectivas



Reducción puntual de la presión mediante zonas individuales de descarga

La PegAssist® Insole está indicada para la reducción plantar selectiva de la presión (hasta un 50 %) y se usa especialmente en casos agudos. También es perfecta en los tratamientos del síndrome del pie diabético. Los paneles son fáciles de sacar de manera individual y permiten la descarga puntual. El fino revestimiento fija la zona modificada y evita que los paneles vecinos se resbalen. Mediante la combinación de una capa de espuma de PE de 18 mm (Plastazote), Poron® y EVA se consigue la reducción perfecta de la presión.

INDICACIONES

Para la descarga selectiva de la presión en:

- > Lesiones plantares
- > Ulceración Plantar
- > Zonas de sobrepresión


PROPIEDADES

- > Ajuste individual mediante celdillas hexagonales o panales (Pegs) que se pueden extraer por separado
- > Apto para el pie derecho e izquierdo



PegContour® Insole

Plantilla con almohadillado blando de panales

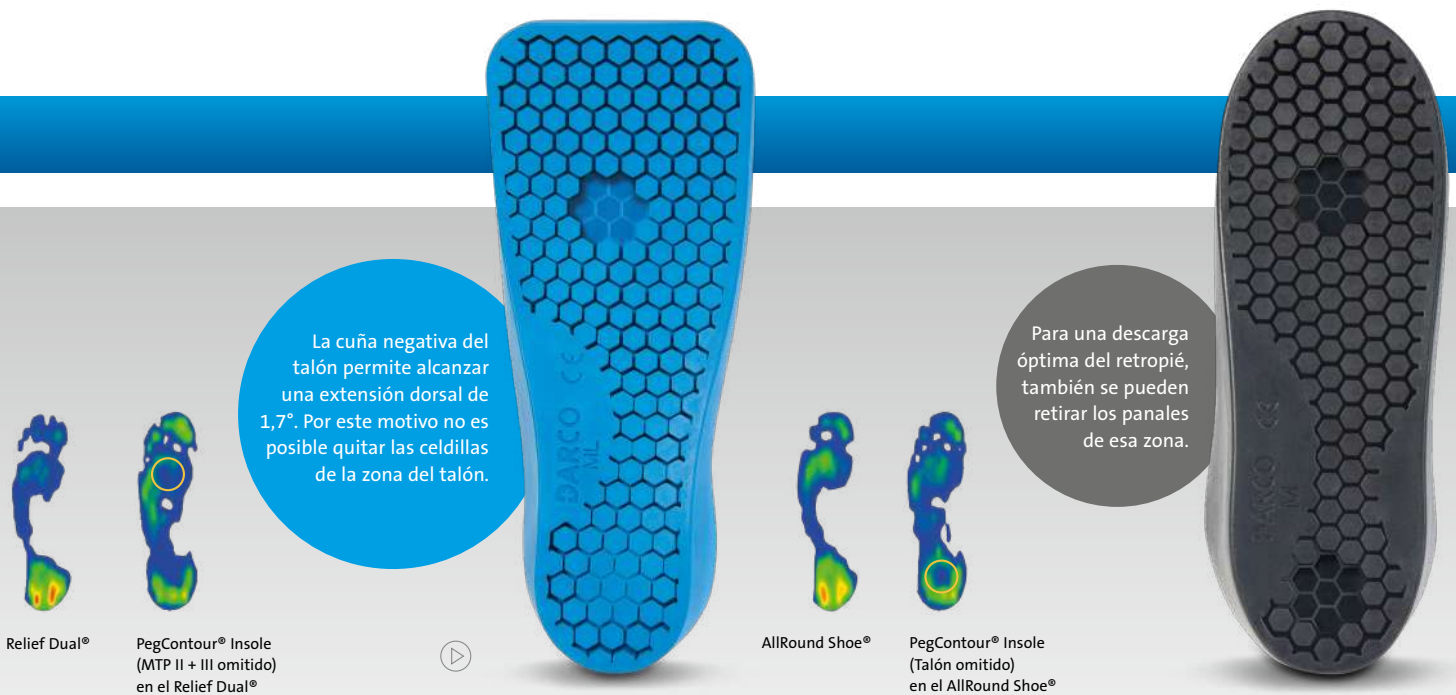

Redistribución completa de la presión además de una descarga selectiva opcional

La PegContour® Insole es un eficaz sistema de plantilla tridimensional para la redistribución de la presión plantar. La retirada de celdillas individuales permite la individualización; para el tratamiento de las heridas agudas o en el postoperatorio. Una fina capa de EVA (base de la plantilla) estabiliza la zona de la descarga y mantiene en su sitio a las demás celdillas. Los arcos longitudinales lateral y medial y el arco transversal proximal aseguran la distribución óptima de la presión. La presión se reduce en hasta un 55 %.

INDICACIONES

- > Después de cirugía del hallux valgus o del dedo pequeño del pie (técnica de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
- > Pie valgo, pie plano, pie plano transverso
- > Alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en combinación con deformidades leves de los pies

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la distribución selectiva de la presión en:

- > Lesiones plantares en la zona del antepié y del mediopié
- > Prevención de úlcera/chancro en la zona del antepié y del mediopié
- > Zonas de sobrepresión

CAMPOS DE APLICACIÓN para la plantilla negra

- > Heridas en el talón
- > Espolón calcáneo (fascitis plantar)
- > Curación de úlceras en la zona del talón (úlceras de decúbito)
- > Aplicaciones postoperatorias y tratamientos en el talón

PROPIEDADES

- > Revestimiento de la plantilla elástica bidireccional de poliéster funcional
- > Material PU tallable
- > Ajuste individual mediante celdillas hexagonales o panales (Pegs) que se pueden extraer por separado
- > Disponible para el pie derecho e izquierdo



PegContour® Insole Uni

Plantilla con almohadillado blando de panales



Descarga puntual de la presión y al mismo tiempo redistribución de la presión en toda la superficie

La plantilla PegContour® Insole Uni es un eficaz sistema tridimensional de plantilla para la redistribución plantar de la presión. El contorno del talón adaptado y la espuma con memoria garantizan una redistribución óptima de la presión. Los panales extraíbles individualmente permiten un alivio selectivo. Con la plantilla PegContour® Insole Uni, se consigue una reducción de la presión de hasta el 45%. Al ser simétrica, esta suela es universalmente apta para el pie derecho e izquierdo y también se puede utilizar para lesiones en el arco plantar.

INDICACIONES

- > Después de cirugía del hallux valgus o del dedo meñique (técnica de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- > Alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en combinación con deformidades leves de los pies
- > Curación de úlceras en la zona del talón (úlceras de decúbito)
- > Espolón calcáneo (fascitis plantar)
- > Heridas en el talón
- > Aplicaciones postoperatorias y tratamientos en el talón

Para la redistribución selectiva de la presión en:

- > Lesiones plantares
- > Prevención de úlcera / chancro
- > Zonas de sobrepresión

PROPIEDADES

- > Revestimiento de la plantilla elástica bidireccional de poliéster funcional
- > Material PU personalizable (gomaespuma con efecto memoria)
- > Ajuste individual mediante celdillas hexagonales o panales (Pegs) que se pueden extraer por separado
- > Apto para el pie derecho e izquierdo

NUEVA
VERSIÓN
de la plantilla
azul y gris


La nueva versión
aporta varias ventajas:

- + Método de producción modificado
→ No se requiere plantilla de EVA
- + Personalización más fácil y rápida
- + Composición optimizada del material de PU
→ Resistencia ideal
- + Nuevo forro de plantilla y nuevo diseño de color
- + Fabricado en Europa



Puzzle Insole®

Plantilla interior modular

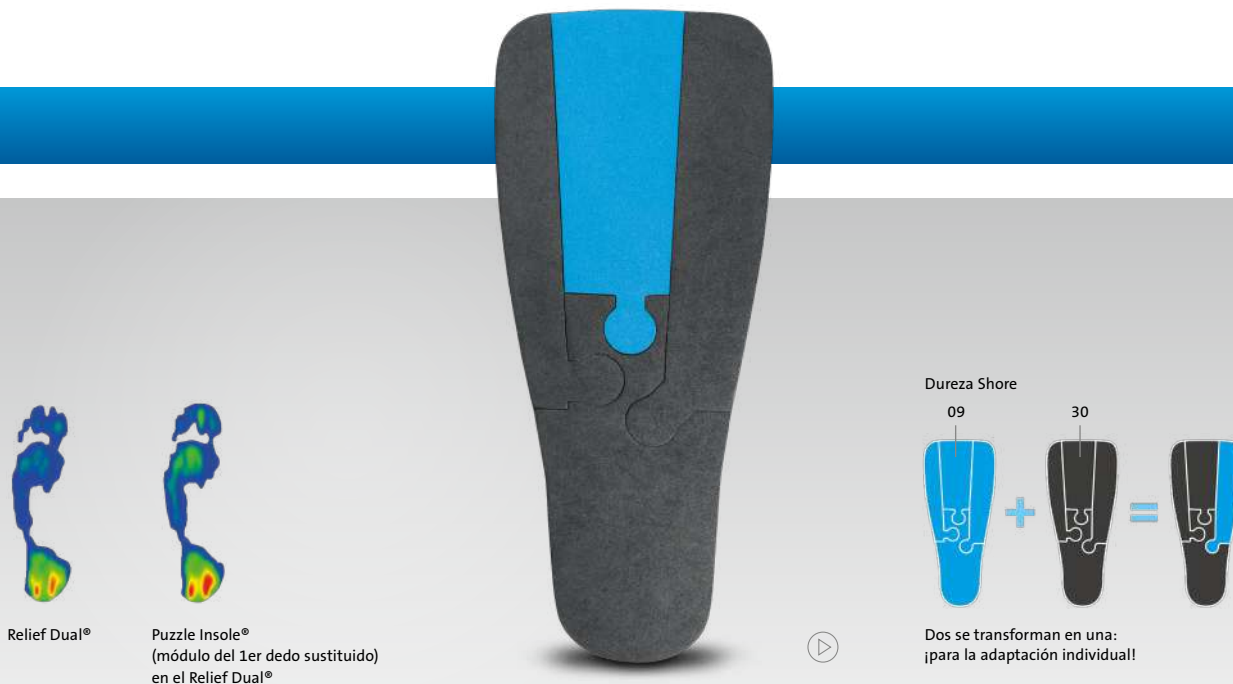

Descarga de la presión acorde con la indicación gracias a una plantilla modular con elementos sustituibles

Simplemente intercambiando los módulos se consigue una distribución de la carga específica para el paciente y la indicación. La cuña negativa del talón de 2,4 grados proporciona una descarga adicional en el antepié. En la zona del pie donde se requiere la descarga, el módulo EVA negro (Shore 30) se sustituye por el elemento azul EVA más blando (Shore 9).

INDICACIONES

1 Módulo del 5º dedo (estrecho)


- > Dedo en varo
- > Fractura de Jones

2 Módulo central

- > Osteotomía de Weil y/o de Helal I – IV
- > Neuroma de Morton
- > Correcciones del dedo en martillo y dedo en garra
- > Artrodesis de la AIP

3 Módulo del 1er dedo (ancho)

- > Osteotomías: técnica de Austin, Scarf, Akin, Youngswick
- > Artrodesis: Lapidus, de la articulación MTF y de la articulación del primer dedo

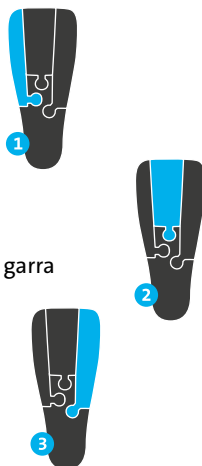

PROPIEDADES

- > Fácil sustitución de los módulos
- > Tacón negativo de 2,4° extensión dorsal
- > Apto para el pie derecho e izquierdo



Productos compatibles



Las lesiones agudas del pie requieren un tratamiento rápido con el sistema de plantillas adecuado. Pero incluso para las soluciones temporales, hasta que se consiga el zapato definitivo con suelas interiores adaptadas a pacientes diabéticos, es importante proveer una solución ortopédica adecuada. La combinación a medida para los dos ámbitos de aplicación: Zapatos terapéuticos del catálogo de DARCO, complementados con plantillas interiores especiales.

		Relief Contour Insole	PegAssist® Insole	PegContour® Insole	PegContour® Insole Uni	Puzzle Insole®
MedSurg Zapato postquirúrgico		✓	✓	✓	✓	✓
MedSurg Pro® Zapato postquirúrgico		✓	✓	✓	✓	✓
AllRound Shoe® Zapato postquirúrgico cerrado para ulcerados					✓	✓
Commodus Open® Zapato postquirúrgico abierto				✓		✓
Relief Dual® Zapato postquirúrgico de descarga		✓	✓	✓	✓	✓
Relief Dual® Plus Zapato postquirúrgico de descarga con caña alta		✓	✓	✓	✓	✓
OrthoWedge Zapato de descarga del antepié				✓		✓
OrthoWedge Light Zapato de descarga del antepié				✓		✓
HeelWedge® Zapato de descarga del talón				✓		✓
SlimLine® Zapato para escayola				✓		✓
Relief Insert® Walker 2.0 Ortesis de pierna y pie		✓	✓	✓	✓	✓

Lista de artículos

TALLA N° DE ART. N° DE ART.



Relief Contour Insole

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Señoras	Derecho	Izquierdo
WS 34,0 – 36,5	RC-W1-R	RC-W1-L
WM 37,0 – 38,5	RC-W2-R	RC-W2-L
WL 39,0 – 41,0	RC-W3-R	RC-W3-L

Caballeros

MS 39,0 – 41,0	RC-M1-R	RC-M1-L
MM 41,5 – 43,0	RC-M2-R	RC-M2-L
ML 43,5 – 45,0	RC-M3-R	RC-M3-L
MXL 45,5 – 47,0	RC-M4-R	RC-M4-L



PegAssist® Insole

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Señoras	
WS 34,0 – 36,5	PAS-W1
WM 37,0 – 38,5	PAS-W2
WL 39,0 – 41,0	PAS-W3

Caballeros

MS 39,0 – 41,0	PAS-M1
MM 41,5 – 43,0	PAS-M2
ML 43,5 – 45,0	PAS-M3
MXL 45,5 – 47,0	PAS-M4



para OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, Commodus Open®, SlimLine®

XS 33,5 – 37,0	PAS0
S 37,5 – 39,5	PAS1
M 40,0 – 41,5	PAS2
L 42,0 – 44,0	PAS3
XL 44,5 – 47,0	PAS4



Puzzle Insole®

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Señoras	
WS 34,0 – 36,5	PI-WS
WM 37,0 – 38,5	PI-WM
WL 39,0 – 41,0	PI-WL

Caballeros

MS 39,0 – 41,0	PI-MS
MM 41,5 – 43,0	PI-MM
ML 43,5 – 45,0	PI-ML
MXL 45,5 – 47,0	PI-MXL

TALLA N° DE ART. N° DE ART.



PegContour® Insole

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Señoras	Derecho	Izquierdo
WS 34,0 – 36,5	PCI-W1-R	PCI-W1-L
WM 37,0 – 38,5	PCI-W2-R	PCI-W2-L
WL 39,0 – 41,0	PCI-W3-R	PCI-W3-L

Caballeros

MS 39,0 – 41,0	PCI-M1-R	PCI-M1-L
MM 41,5 – 43,0	PCI-M2-R	PCI-M2-L
ML 43,5 – 45,0	PCI-M3-R	PCI-M3-L
MXL 45,5 – 47,0	PCI-M4-R	PCI-M4-L



para AllRound Shoe®

	Derecho	Izquierdo
XS 37,0 – 38,0	PCI-ARS0-R	PCI-ARS0-L
S 39,0 – 40,0	PCI-ARS1-R	PCI-ARS1-L
M 41,0 – 42,0	PCI-ARS2-R	PCI-ARS2-L
L 43,0 – 44,0	PCI-ARS3-R	PCI-ARS3-L
XL 45,0 – 46,0	PCI-ARS4-R	PCI-ARS4-L
XXL 47,0 – 48,0	PCI-ARS5-R	PCI-ARS5-L



PegContour® Insole Uni

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Señoras	
WS 34,0 – 36,5	PCIU-W1
WM 37,0 – 38,5	PCIU-W2
WL 39,0 – 41,0	PCIU-W3

Caballeros

MS 39,0 – 41,0	PCIU-M1
MM 41,5 – 43,0	PCIU-M2
ML 43,5 – 45,0	PCIU-M3
MXL 45,5 – 47,0	PCIU-M4



para OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, Commodus Open®, SlimLine®

XS 33,5 – 37,0	PCIU0
S 37,5 – 39,5	PCIU1
M 40,0 – 41,5	PCIU2
L 42,0 – 44,0	PCIU3
XL 44,5 – 47,0	PCIU4



para AllRound Shoe®

XS 37,0 – 38,0	PCIU-ARS0
S 39,0 – 40,0	PCIU-ARS1
M 41,0 – 42,0	PCIU-ARS2
L 43,0 – 44,0	PCIU-ARS3
XL 45,0 – 46,0	PCIU-ARS4
XXL 47,0 – 48,0	PCIU-ARS5



Vídeos de productos

