

Les dispositifs de décharge du talon Heelift® en 3 variantes pour un soin optimal

Décharge efficace dans la zone du talon, notamment pour les patients allongés

Heelift®



- > Le modèle original est un accessoire idéal et rentable pour les dispositifs de décharge du talon et la décharge de pression

Heelift® Glide



- > La version premium de la Heelift® avec sangle d'avant-pied supplémentaire pour davantage de sécurité et matériau extérieur glissant

Heelift® AFO



- > La version améliorée allie toutes les caractéristiques de la Heelift® Glide avec une attelle semi-rigide qui permet une charge légère


- > Pour la prévention et la guérison des plaies de pression au niveau du talon ainsi qu'en cas de syndrome du pied diabétique ou d'escarres
- > En cas de diabète avec symptômes de déficiences sensorielles au niveau neurologique
- > En cas d'immobilité prolongée ou de coma
- > Adaptation individuelle à chaque patient

La face intérieure de tous les modèles est disponible en deux types de mousse : alvéolée (Standard) ou lisse (Smooth)



DARCO

Pourquoi la Heelift® est le soin qui convient pour le patient?

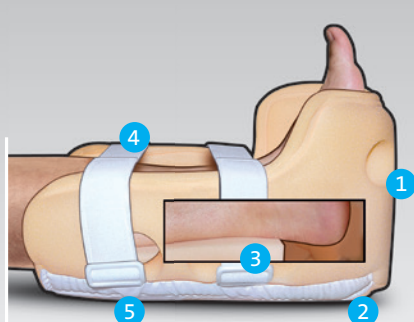


Tous les modèles Heelift®

- 1 Orifices de ventilation favorisent la circulation de l'air pour plus de confort.
- 2 Orifice de décharge du talon permet une évaluation visuelle du talon.
- 3 Rembourrage en mousse fixé soulève la jambe, décharge le talon pour une guérison optimale d'une plaie de pression du talon.
- 4 Sangles de fermeture rapide souples pour bien-aller individuel.
- 5 Support sans frottement facilite les mouvements pour plus de sécurité des patients.



Heelift® Glide

- 6 Face extérieure lisse permet un glissement facile de la jambe sur les draps.
- 7 Sangle d'avant-pied fixe le pied et contribue à soutenir l'avant-pied.

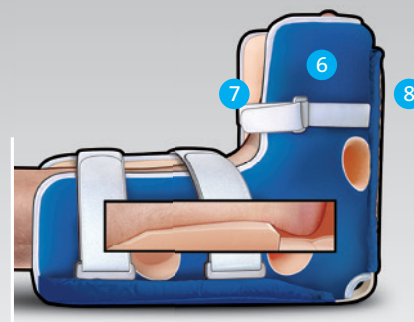

Heelift® AFO

- 6 Face extérieure lisse permet un glissement facile de la jambe sur les draps.
- 7 Sangle d'avant-pied fixe le pied et contribue à soutenir l'avant-pied.
- 8 Attelle semi-rigide est partiellement flexible, mais offre un contrôle optimal de la position et de la mobilité de la cheville.



Choix de la surface en mousse

La conception en mousse spéciale de la version alvéolée produit une meilleure circulation de l'air. Les alvéoles assurent un effet rafraîchissant agréable.

La mousse lisse a été spécialement développée pour la peau sensible. Une formation d'œdèmes est ainsi contrecarrée. Recommandé pour les patients diabétiques.

TAILLE TOUR DE MOLLET N° D'ART.

Heelift®

Standard (alvéolé)

Petite	15 – 25 cm	DM-HLP
Normal	20 – 36 cm	DM-HL

Smooth (lisse)

Petite	15 – 25 cm	DM-HLSP
Normal	20 – 36 cm	DM-HLS
Bariatric	30 – 58 cm	DM-HLSB
Couleur : Beige		

Heelift® Glide

Standard (alvéolé)

Petite	15 – 25 cm	DM-HLPG
Normal	20 – 36 cm	DM-HLG

Smooth (lisse)

Petite	15 – 25 cm	DM-HLSPG
Normal	20 – 36 cm	DM-HLSG
Bariatric	30 – 58 cm	DM-HLSBG
Couleur : Rouge		

Heelift® AFO

Standard (alvéolé)

Universal	20 – 36 cm	DM-HLAFO
-----------	------------	----------

Smooth (lisse)

Universal	20 – 36 cm	DM-HLSAFO
Couleur : Bleu		

Tous les modèles de Heelift® peuvent se porter à droite et à gauche et peuvent être lavés à 60°C dans le sac de linge livré ou stérilisés dans l'autoclave.

